



Meril
Endo-Surgery

استیپلرهای جراحی Meril

MIRUSTM

استپلر حلقوی


استپلر حلقوی در سراسر دستگاه گوارش جهت ایجاد آناستوموز به روش‌های اتصال انتها به انتها (End-to-End)، انتها به کنار (End-to-Side) و کنار به کنار (Side-to-Side)، در جراحی‌های باز و اندوسکوپیک کاربرد دارد. فناوری ارتفاع قابل تنظیم منگنه‌ها، حداقل تنش بافتی و فشار کنترل شده را فراهم ساخته و در عین حال، بازخورد لمسی و صوتی مطمئن در هنگام شلیک، اطمینان لازم از انجام صحیح فرآیند را در اختیار جراح قرار می‌دهد. استپلر حلقوی در مدل‌های استاندارد با دو ردیف منگنه و همچنین با طراحی نوآورانه سه‌ردیفه عرضه می‌گردد. در مدل سه‌ردیفه، به‌کارگیری ردیف سوم از منگنه‌ها موجب افزایش استحکام آناستوموز، ارتقای ایمنی محل جراحی و کنترل مؤثرتر خون‌ریزی می‌شود و در نتیجه، اطمینان بالاتری را برای جراح فراهم می‌آورد.



ویژگی های اصلی

مقیاس فشردگی بافت:

بازخورد بصری هنگام شلیک به منظور اطمینان از اعمال فشار مناسب و یکنواخت (فایر کردن)

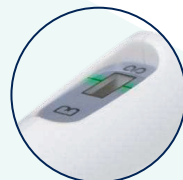

ارتفاع قابل تنظیم مگنه:

امکان انطباق با ضخامت های متفاوت بافت به منظور ایجاد فشردگی یکنواخت، کاهش آسیب بافتی



پیچ تنظیم میزان فشردگی :

امکان اعمال فشردگی کنترل شده همراه با بازخورد لمسی دقیق



ضامن اطمینان:

جلوگیری از شلیک تصادفی



سیستم برشی تفلون سفید:

ایجاد بازخورد شنیداری واضح



جدول مشخصات فنی:

تعداد مگنه ها	تعداد ردیف های مگنه	قطر برش	ارتفاع بسته مگنه (mm)	ارتفاع باز مگنه (mm)	قطر استپلر	استپلر
۲۷	۳	۱۲	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۱	MCS-21R3
۳۳	۳	۱۵	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۴	MCS-24R3
۳۳	۳	۱۶	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۵	MCS-25R3
۳۳	۳	۱۷	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۶	MCS-26R3
۳۶	۳	۲۰	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۹	MCS-29R3
۳۶	۳	۲۱	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۳۱	MCS-31R3
۴۲	۳	۲۲	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۳۲	MCS-32R3
۱۶	۲	۱۲	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۱۹	MCS-19
۱۶	۲	۱۳	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۱	MCS-21
۱۸	۲	۱۵	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۴	MCS-24
۲۰	۲	۱۶	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۵	MCS-25
۲۰	۲	۱۷	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۶	MCS-26
۲۴	۲	۲۰	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۲۹	MCS-29
۳۰	۲	۲۲	۱/۰-۲/۵	۴/۵	۳۲	MCS-32



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)،
شماره ۱۲۸، کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹.