



Meril
Endo-Surgery

استیلرهای جراحی Meril

MIRUSTM

استپلر هموروئید

استپلر هموروئید در جراحی عمومی به منظور درمان پرولاپس رکتوم و هموروئید، با استفاده از برش و بخیه همزمان بافت‌های هموروئیدی، در بیماران مبتلا به بیرون زدگی بافت مقعدی به طور مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار امکان انجام درمانی دقیق، ایمن و کم‌تهاجمی را فراهم می‌سازد. اجزا کیت استپلر هموروئید:

- دایلاتور (Dilator)
 - آنوسکوپ (Anoscope)
 - ابزار برای عبور نخ بخیه (Suture threader)
 - ابزاری برای هدایت و تثبیت سایر ابزارها (Obturator)
- استپلر هموروئید در دو مدل با دو ردیف منگنه و سه ردیف منگنه عرضه می‌شود. طراحی سه ردیف منگنه با ایجاد یک ردیف اضافی، موجب استحکام بهتر محل زخم و کنترل مؤثرتر خونریزی می‌گردد.



استپلرهای ۲ و ۳ ردیفه باعث هموستاز کافی می‌شود.



ویژگی های اصلی

نشانگر میزان فشردگی بافت:

امکان تنظیم ارتفاع بسته منگنه در بازه ۰/۷۵ تا ۱/۵ میلی متر




کانال های هدایت:

امکان برداشت یکنواخت بافت حلقوی با کشش کنترل شده، برای جراحی هموروئید دقیق، ایمن و مؤثر.



شفت و سر انویل:

شفت ثابت انویل از جنس استیل ضد زنگ به منظور استحکام بیشتر و عملکرد پایدار برای جراحی دقیق هموروئید

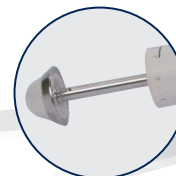


ضامن اطمینان:

جلوگیری از شلیک تصادفی



پیچ تنظیم میزان فشردگی:

امکان اعمال فشردگی کنترل شده با دقت بالا

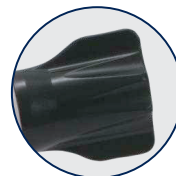

جدول مشخصات فنی:

تعداد ردیف منگنه ها	تعداد منگنه ها	ارتفاع بسته منگنه (mm)	ارتفاع باز منگنه (mm)	شرح	استپلر
۳	۴۸	۰/۷۵ - ۱/۵	۳/۵	استپلر یکبار مصرف PPH3ROW34	MPPH34R3
۲	۳۲	۰/۷۵ - ۱/۵	۳/۵	استپلر یکبار مصرف PPH32	MPPH32
۲	۳۲	۰/۷۵ - ۱/۵	۳/۵	استپلر یکبار مصرف PPH34	MPPH34



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)،
شماره ۱۲۸، کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹.